


REVLINE

RL 015

Электрлі дыбыстық тіс щеткасы

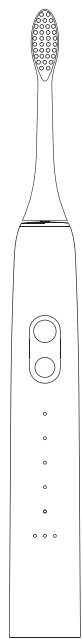

Құттықтаймыз!

Құрметті клиент, сіз тістеріңіз бен қызыл иегіңіздің әдемі және сау болуына мүмкіндік беретін жоғары технологиялық құрылғының иесі болдыңыз. Бірінші қолданғаннан кейін тазалықтың жаңа деңгейін сезініңіз.

Сақтық шаралары

Revyline RL 015 щеткасын бірінші рет қолданар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және оны сақтаңыз.

Электр жарақаттарының, күйіктердің, өрттің алдын алу үшін:

1. Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
2. Душ қабылдау кезінде щетканы қолданбаңыз.
3. Электр желісіне қосылған зарядтау құрылғысын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
4. Құрылғыны су құйылған ыдысқа немесе шұңғылшаға түсуі мүмкін жерлерде сақтамаңыз.
5. Щетканы дымқыл зарядтау алаңына қоймаңыз.
6. Құрылғы мен оның бөлшектерін балалар мен психикалық ауытқулары бар адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
7. Құрылғыны тікелей күн сәулесінен қорғалған құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.
8. Щетканы зарядтау базасында сақтауға болмайды. Зарядтау аяқталғаннан кейін щетканы зарядтау платформасынан алыңыз.
9. Зарядтау құрылғысы ақаулы немесе кабель зақымдалған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз.
10. Тек фирмалық саптамалар мен керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
11. Құрылғыны ыстық беттерден алыс зарядтаңыз.
12. Бұрын оттегі немесе аэрозоль қолданылған бөлмеде щетканы қоспаңыз.
13. Щетканы қолданар алдында барлық алынбалы құрылымдарды ауыз қуысынан алыңыз.
14. Ауыз қуысында немесе тілде жаралар болған кезде щетканы қолданбаңыз.
15. Ауыстырылатын саптамалар қатаң жеке пайдалануға арналған. Оларды бірнеше адаммен ортақ қолдануға тыйым салынады.
16. Құрылғыны тазалау үшін ыдыс жуғыш машинаны пайдаланбаңыз.

Құралды физикалық мүмкіндіктері шектеулі немесе психикалық ауытқулары бар адамдар (соның ішінде балалар), сондай-ақ аспапты пайдалану тәжірибесі жеткіліксіз адамдар – олардың қауіпсіздігіне жауапты адам олардың нұсқаулықты үйренгеніне немесе аспапты бақылауда пайдалануға дайын екеніне көз жеткізгенге дейін қолдануға болмайды.

Аккумуляторды зарядтау

Аккумуляторды зарядтау үшін зарядтау базасын қуат көзіне қосып, оған зарядтау алаңын қойып, щетканы тігінен орнату керек.

Аккумуляторды зарядтау динамикасын корпус дисплейіндегі индикаторлар бойынша бағалауға болады.

Бір шам біркелкі қызыл жарықпен жанады – зарядтау 30% аз.

Екі индикатор біркелкі қызыл шаммен жанады – зарядтау

33-67%.

Үш индикатор біркелкі қызылшаммен жанады – зарядтау 67-100%.

Аккумулятор 30 секунд бойы толық зарядталған кезде біркелкі жасыл шам жанып, содан кейін сөнеді. Индикатордың жыпылықтауын тоқтату зарядтаудың аяқталғанын көрсетеді. Аккумуляторды толық зарядтау нәтижесінде дисплейде индикатордың жасыл түсі жанады.

Аккумуляторды толық зарядтау уақыты шамамен 18 сағатты құрайды.

Құрылғыны қосу

Құрылғыны қосу үшін қуат батырмасын бір рет басыңыз. Өшіру үшін батырманы екі секунд ұстап тұру керек немесе құрылғы 2 минут жұмыс істегеннен кейін өздігінен өшеді. Құрылғыны екі минут жұмыс істегеннен кейін автоматты түрде өшіру қарастырылған (White режимінде – 2,5 минуттан кейін).

Тазалау режимін таңдау

Revyline RL 015 электр щеткасының конструкциясы бес жұмыс режимін және қылшықтардың тербеліс қарқындылығының үш деңгейін пайдалануға мүмкіндік береді.

Clean (тазалау):

Қарқынды тазалау режимі. Барлық қол жетімді режимдердің ішіндегі ең қуаттысы. Бұл режим бұрын жоғары жиілікті дыбыстық щеткаларды қолданған пайдаланушыларға үнемі қолдануға ұсынылады.

Sensitive (сезімтал тістер үшін):

Жұмсақ діріл режимі. Бұл режим дыбыстық тіс щеткасының әсеріне біртіндеп үйрену мақсатында жаңадан келген пайдаланушылар үшін немесе қарқынды режимге сәйкес келмейтіндер үшін, атап айтқанда, тістердің сезімталдығы жоғары адамдарға ұсынылады.

Gum Care (қызыл иек күтімі):

Режим қылшықтардың тербеліс амплитудасының жоғарылауымен сипатталады. Бұл массаждың максималды тиімділігіне қол жеткізеді, қызыл иектің жұмсақ тіндері күшейеді.

White (ағарту):

Пигментті өңезді жою және эмальды ағарту қылшықтардың тербеліс амплитудасының параметрлерін және процедураның ұзақтығын (2,5 минутқа дейін) ауыстыру арқылы жүзеге асырылады.

Polish (Жылтырату):

Эмальдардың табиғи жылтырлығы мен жарықтығын қайтаруға мүмкіндік береді.

Режимді таңдау тиісті батырманы ретімен басу арқылы жүзеге асырылады. Таңдалған режим іске қосылған кезде жарық индикаторы жанады.

Режимді бұғаттау


Режимді бұғаттау үшін:

Щетканы қосыңыз.

Қажетті режимді таңдаңыз.

Режимді таңдау және қуат батырмаларын бір уақытта басып, оларды 3 секунд ұстап тұрыңыз. Барлық режимдердің индикаторлары бір уақытта жанып, сөнеді.

Назар аударыңыз! Режимді бұғаттау кезінде режимдердің

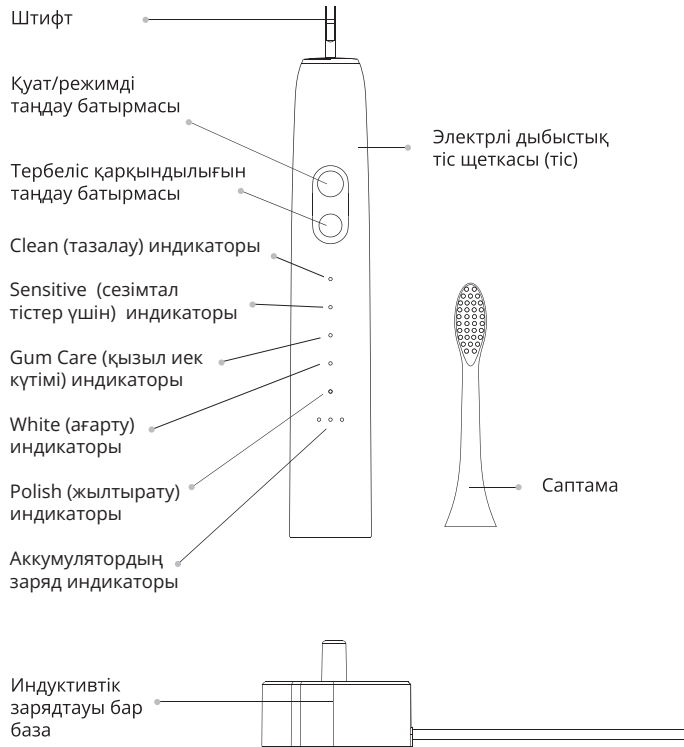

ауыстырып қосқышы жұмыс істемейді. Бұғаттан алу үшін екі батырманы бір уақытта басып, 3 секунд ұстап тұру керек. Барлық режимдердің индикаторлары екі рет жыпылықтайды. Бұл ағымдағы режим параметрлері алынып тасталғанын және барлық мүмкіндіктер бастапқы күйіне оралғанын білдіреді.

Қарқындылық деңгейі

Әр жұмыс режимі үшін қылшықтардың тербеліс қарқындылығының үш деңгейінің бірін таңдауға болады. Таңдау тиісті батырманы басу арқылы жүзеге асырылады және индикаторлардың жарқырауымен расталады. Егер бір индикатор жанып тұрса – қарқындылықтың минималды деңгейі, екеуі – орташа, үшеуі – тазалағыш бастиек тербелісінің максималды амплитудасы.

Саптаманы орнату және ауыстыру

Саптаманың жұмыс беті щетка корпусының бетіне сәйкес келетіндей етіп металл өзегіне сырғыту арқылы саптаманы орнатыңыз. Щетканың басын металл штифтке мықтап басыңыз.

Назар аударыңыз! Саптама мен щетка корпусының арасында кішкене алшақтық бар (0,3-1,2 мм).

Тазалау процедурасы

1. Саптаманы отыратын жерге ақырын сырғытыңыз. Саптама мен корпус арасында кішкене бос орын қалдырыңыз, себебі ол тазалағыш бастиек дірілдеген кезде қажет. Саптаманың дұрыс салынғанына көз жеткізіп, щетканы қосыңыз.
2. Тазалағыш бастиекті сулаңыз, содан кейін қылшықтарға тіс пастасын жағыңыз. Жағу алдында немесе кезінде щетканы қосу ұсынылмайды. Бұл тіс пастасының шашырауына әкелуі мүмкін.
3. Щетка саптамасын қызылиек сызығына параллель орналастырып, тістердің бетіне жақындатыңыз. Біркелкі тазартуды қамтамасыз ету үшін ауыз қуысын бірдей мөлшердегі төрт шартты аймаққа бөліп, оларды кезекпен тазалаңыз.
4. Тазалағыш бастиекті тіс бетіне қатты баспаңыз, әйтпесе эмаль мен қызыл иек зақымдалуы мүмкін. Тазалағыш бастиекті баяу жылжытыңыз, айналмалы-кері қозғалыстар жасаңыз.
5. Тазалау аяқталғаннан кейін ауыз қуысын таза сумен жақсылап шайыңыз, щетканың басын ағынды сумен шайыңыз.

Тіс щеткасына күтім жасау

Revyline RL 015 электр тіс щеткасы үнемі күтімді қажет етеді. Қалам мен щетка саптамасын таза ағынды сумен шайыңыз. Қажет болса, барлық беттерді сабындалған жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Щетканы құрғақ жерде, күн сәулесінен алыс жерде сақтаңыз.

Ауыстырылатын саптамалар

Құрылғының негізгі жиынтығында орташа қаттылықтағы екі стандартты ауыстырылатын саптама бар. 3-6 ай үнемі қолданғаннан кейін саптамалар тозады, оларды ауыстыру ұсынылады.

Назар аударыңыз! Әр түрлі пайдаланушылардың бір саптаманы ортақ қолдануына қатаң тыйым салынады.

Кепілдік

Құрылғыға кепілдік 2 жыл. Құралға кепілдік берілген техникалық қызмет көрсету қолданыстағы кепілдік мерзімі ішінде тегін

жүзеге асырылады. Әрі қарай, щеткаға қызмет көрсету сатып алушының есебінен жүзеге асырылады.

Кепілдік қолданылмайды:

Шығын материалдары мен компоненттеріне. Мақсатына сай емес пайдалану салдарынан істен шыққан және/немесе ақаулар алған тауарларға; бүлінуге әкеп соққан абайсызда немесе ұқыпсыз пайдалану (шамадан тыс жүктеуді қоса алғанда); уәкілетті емес ұйымның (жеке тұлғаның) түрлендіруі, ашуы және/немесе жөндеуі. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген пайдалану және/немесе сақтау немесе тасымалдау қағидалары бұзылған кезде. Пайдалану ережелерінде көзделмеген қуат көзіне қосылу салдарынан істен шыққан және/немесе ақаулар алған тауарларға. Жойылмаған кемшіліктермен пайдаланылған тауарларға. Үшінші тұлғалардың әрекеттері, табиғат құбылыстары және табиғи апаттар, үй жануарлары мен жабайы жануарлар, жәндіктер, тауарлардың бөгде заттар мен сұйықтықтардың енуі сияқты өндірісшіге тәуелді емес себептерден туындаған ақауларға. Пайдалану процесінде және табиғи тозу нәтижесінде пайдалану сырты және ішкі ластануларға, сызаттарға, жарықтарға, тозуға және өзге де механикалық зақымдануларға.

Жалпы мәселелер және оларды шешу

Мәселе: қарқындылық деңгейін таңдаудағы қиындықтар
Шешім: Құрылғыны қосқаннан кейін қылшықтардың тербеліс қарқындылығының қажетті деңгейін таңдаңыз. Тазалау тиімділігін арттыру үшін қылшықтардың максималды тербеліс деңгейін пайдаланыңыз. Бұл жағдайда таңдалған режим ыңғайсыздық тудырмауы маңызды. Қажет болса, құрылғының аз қарқынды жұмыс режимін таңдауға болады.

Мәселе: тазалау кезінде қызыл иектің қан кетуі

Шешім: Уайымдамаңыз. Бұл көбінесе электр щеткасын бірінші рет қолданатын пайдаланушыларда байқалады. Щеткамен танысуды ең жұмсақ және қауіпсіз Sensitive режимінен бастау керек. Көп ұзамай қан кету тоқтауы керек. Егер щетканы әрі қарай қолданған кезде ыңғайсыздық пен қан кету жалғаса берсе, тазалауды тоқтатып, тіс дәрігерінен кеңес алу керек.

Жиынтық

Revyline RL 015 щеткасының негізгі блогы.

Стандартты саптама – 3 дана.

Индуктивті зарядтау негізі.

Нұсқаулық.

Егер сізде сұрақтар туындаса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

+7 700 219 40 93 www.revyline.kz

Техникалық сипаттамалары

- Үлгі: RL 015
- Тістерді тиімді тазартуға арналған.
- Қылшықтардың тербеліс жиілігі: минутына 31 000-40 000.
- X-Waves-кавитация әсері.
- 5 жұмыс режимі.
- Қарқындылықтың 3 деңгейі.
- Корпус материалы: ABS + PC.
- Қылшық материалы: DuPont нейлоны.
- Ылғалдан қорғау: IPX7.
- Батарея сыйымдылығы: 2000 mAh.
- Қуат тұтынуы: 3,7 Вт.
- Толық зарядтау уақыты: шамамен 18 сағат.
- Жұмыс уақыты: 90 күнге дейін.
- Аккумуляторды индуктивті зарядтау.
- Шу деңгейі: 60 дБ аз.
- Өлшемдері: 251x29x28, 5 мм.
- Салмағы: 139 г (тазалағыш бастиекті қосқанда).
- Тазалау бетінің өлшемі: 23x9x11 мм.
- Қылшықтардың ұзындығы: 11 мм.
- Қылшықтардың диаметрі: 0,152 мм.
- Орташа қызмет ету мерзімі: 5 жыл.
- Кепілдік: 2 жыл.

Ресей Федерациясындағы импорттаушы
МГАДЖЕТ ЖШҚ
Мекенжайы: 140002, Люберцы қ., Октябрьский даңғ., 20-үй, 2-корпус.

Қазақстандағы импорттаушы: МГАДЖЕТ КЗ ЖШС
Мекенжайы: Алматы қ., Төле би к-сі, 23а, 24-офис.

Қызмет ету мерзімі 5 жыл.
Тауар сертификатталған.

Өндірілген: Shenzhen Fortunecome Technology Co., Ltd., No.57 Shangxia Road, Shangxiawei, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen City, China.

Кепілдік талоны

Ұйымның атауы

Сату күні

Мөрге арналған орын