


REVYLINЕ

RL 610

Ауыз қуысына арналған портативті ирригатор

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

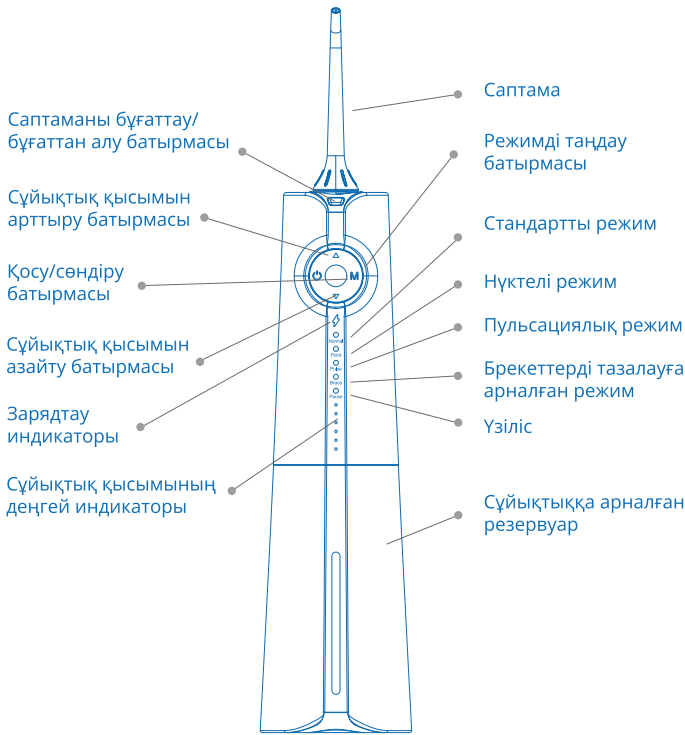

Құттықтаймыз!

Сіз тістеріңіз бен қызылиегіңіздің әдемі және сау болуына мүмкіндік беретін жоғары технологиялық құрылғының иесі болдыңыз. Бірінші қолданғаннан кейін тазалықтың жаңа деңгейін сезініңіз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Revyline RL 610 ирригаторын бірінші қолданар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны сақтаңыз.

төгіп тастаңыз. Қажет болса, аккумуляторлық батареяны зарядтаңыз.

ШАЙҒЫШТАР МЕН ЕРІТІНДІЛЕРДІ ҚОЛДАНУ

Жақсы әсер ету үшін Revyline шайғыштары мен арнайы бальзамдарды қолданған жөн. Қолданылатын өнімнің нұсқауларына сәйкес дозаны есептеңіз. Ерітінділерді әр қолданғаннан кейін ирригаторды шаю керек. **Назар аударыңыз!** Ауыз қуысына арналған кейбір шайғыштардың құрамына спирт кіреді, ол құрылғы жүйесінде ұзақ уақыт болған кезде оның бөлшектерін зақымдауы және сайып келгенде оның қызмет ету мерзімін төмендетуі мүмкін.

КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Құрылғыны суға батырмаңыз. Сұйықтықты резервуарда сақтауға тыйым салынады. Құрылғының бетін тазалау үшін жұмсақ шүберек пен жұмсақ абразивті емес тазартқышты пайдаланыңыз. Кермек суды үнемі қолданған кезде құрылғының бөлшектерінде әк шөгінділері пайда болуы мүмкін. Оларды жою үшін суару құралын пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес тазалау үшін арнайы Revyline құралын пайдаланыңыз. Өндіруші судың кермектігіне байланысты ирригаторды үш айда бір-үш рет тазалауды ұсынады.

Назар аударыңыз! Құрылғының жұмысына байланысты жарақаттануды немесе жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін тек өндіруші зауыт ұсынған стандартты бөлшектер мен керек-жарақтарды пайдаланыңыз.

ЖИЫНТЫҚТАҒЫ САПТАМАЛАР

Тұрақты пайдалануға арналған стандартты саптамалар – 2 дана. **Назар аударыңыз!** Саптама қатаң жеке болуы керек. Бір саптаманы әртүрлі пайдаланушылармен ортақ қолдануға тыйым салынады. 3-6 айдан кейін саптаманы үнемі қолданғаннан кейін гигиена мақсатында ауыстыру ұсынылады. Саптаманы әр 3 ай сайын ауыстыру ұсынылады.

КЕПІЛДІК

Құрылғыға кепілдік – 2 жыл. Құралға кепілдік берілген техникалық қызмет көрсету қолданыстағы кепілдік мерзімі ішінде тегін жүзеге асырылады. Әрі қарай, ирригаторға қызмет көрсету сатып алушының есебінен жүзеге асырылады.

КЕПІЛДІК ҚОЛДАНЫЛМАЙДЫ:

Шығын материалдары мен жиынтықтаушыларына. Мақсатына сай емес пайдалану салдарынан істен шыққан және/немесе ақаулар алған тауарларға, бүлінуге әкеп соққан абайсызда немесе ұқыпсыз пайдалану (шамадан тыс жүктеуді қоса алғанда), уәкілетті емес ұйымның (жеке тұлғаның) түрлендіруі, ашуы және/немесе жөндеуі, пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген пайдалану және/немесе сақтау немесе тасымалдау қағидаларын бұзу. Дұрыс емес қуат көзіне қосылу салдарынан істен шыққан және/немесе ақаулар алған тауарларға. Жойылмаған кемшіліктермен пайдаланылған тауарларға. Үшінші тұлғалардың әрекеттері, табиғат құбылыстары және табиғи апаттар, үй жануарлары мен жабайы жануарлар, жәндіктер, тауарлардың бөгде заттар мен сұйықтықтардың енуі сияқты өндірушіге тәуелді емес себептерден туындаған ақауларға. Пайдалану процесінде және табиғи тозу нәтижесінде пайда болған сыртқы және ішкі ластануларға, сызаттарға, жарықтарға, тозуға және өзге де механикалық зақымдануларға.

ЖАЛПЫ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ

Саптама алынбайды.

Шешім: Саптаманы алу кезінде құрылғының корпусында орналасқан саптаманы бұғаттау батырмасын басып тұрыңыз.

Ағынның қысым деңгейін таңдаудағы қиындықтар

Шешім: Құрылғыны қосқаннан кейін құрылғының қажетті жұмыс режимін таңдаңыз. Ирригация тиімділігін арттыру үшін сізге ыңғайсыздық тудырмайтын режимді қолданыңыз. Қызылиектің қабынуы мен

Электр жарақаттардың, күйіктердің, өрттің алдын алу үшін:

1. Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтыққа түсірмеңіз.
2. Душ қабылдау кезінде ирригаторды қолданбаңыз.
3. Зарядтауға арналған ағытпаға судың енуіне, USB-кабельдің сулануына жол бермеңіз.
4. Құрылғыны су құйылған ыдысқа немесе шұңғылшаға түсуі мүмкін жерлерде сақтамаңыз.
5. Су ағынын тілдің астына, құлаққа, мұрынға немесе басқа сезімтал жерлерге бағыттамаңыз. Құрылғы теріні және шырышты қабатты зақымдауы мүмкін қуатты ағынды шығарады.
6. Тек фирмалық саптамалар мен керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
7. Ауыстырылатын саптамаға арналған ұяшыққа бөгде заттарды салмаңыз.
8. Құрылғыны ыстық беттерден алыс зарядтаңыз.
9. Бұрын оттегі немесе аэрозоль қолданылған бөлмеде ирригаторды қоспаңыз.
10. Құрамында йод, май, ағартатын ингредиенттер бар шайғыштарды резервуарға құймаңыз. Олар құрылғының тиімділігі мен қызмет ету мерзімін төмендетеді.
11. Резервуарға емдеуші тіс дәрігері ұсынған, температурасы 40 градустан аспайтын суды немесе ерітіндіні құйыңыз.
12. Ирригаторды қолданар алдында барлық алынбалы құрылымдарды ауыз қуысынан алыңыз.
13. Ауыз қуысында немесе тілде жаралар болған кезде құрылғыны қолданбаңыз.
14. 6 жастан асқан балалар ирригаторды ересектердің бақылауымен ғана қолдануы мүмкін.

АККУМУЛЯТОРДЫ ЗАРЯДТАУ

Бірінші рет қолданар алдында аккумуляторды 8 сағат бойы зарядтау керек.

Ирригаторда USB Type-C сымымен зарядтау мүмкіндігі бар – бүгінгі күнге дейін ең өзекті ағытпа түрі.

1. Құрылғыны өшіріңіз.
 2. Микро-USB кабелін құрылғының корпусында орналасқан ағытпаға салыңыз. Кабельдің USB ағытпасын зарядтау құрылғысына (жинақта жеткізілмейді) немесе шығыс кернеуі 5 Вольт болатын жұмыс істейтін электрондық құрылғыға (соның ішінде ұялы қуат банкі, компьютерлік USB порты, ұялы телефонның зарядтау құрылғысы және басқа 5 вольтты шығыс адаптерлері) қосыңыз.
- Зарядтау кезінде зарядтау индикаторы қызыл жарықпен жанады. Толық зарядталған кезде индикатордың түсі жасылға өзгереді. Назар аударыңыз! Аккумуляторды зарядтау кезінде құрылғыны пайдалану мүмкін емес. Ирригатордың корпусы тегіс, көлденең жерде болуы керек. Зарядтау ағытпасы құрғақ болуы керек.

АККУМУЛЯТОРДЫҒЫ ЗАРЯД ДЕҢГЕЙІН ТЕКСЕРУ

Режимді таңдау батырмасын 0,5 секунд басып тұрыңыз.

| Индикаторлар | Заряд деңгейі |
|-----------------------|---------------|
| 5 индикатор жанып тұр | 85-100% |
| 4 индикатор жанып тұр | 60-84% |
| 3 индикатор жанып тұр | 50-59% |
| 2 индикатор жанып тұр | 20-49% |
| 1 индикатор жанып тұр | кем 20% |

әлсіздігі үшін арнайы периодонтальды саптаманы (қосымша сатып алынады) қолданыңыз.

Ирригация кезінде қан кету

Шешім: қан кету бұл қызыл иектің қабынуының тән симптомы болып табылады. Қан кету кезінде ирригатордың төмен қысым деңгейі бар жұмыс режимін таңдау керек. Егер ары қарай қолдану кезінде қан кету жалғасатын болса, тіс дәрігерінен кеңес алу керек.

Судың шашырауын қалай болдырмауға болады?

Шешім: Ирригация кезінде аузыңызды кең ашып тік тұрмаңыз. Шұңғылшаға қарай еңкейіп, аузыңызды ашыңыз. Су табиғи түрде ауыз қуысынан ағып кетеді.

ЖИЫНТЫҚ

Revyline RL 610 ирригаторының негізгі блогы.

Сұйықтыққа арналған резервуар.

Стандартты саптама – 2 дана.

USB кабелі.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық.

Техникалық сипаттамалары

Үлгі: RL 610

Тіс және қызылиек ауруларының алдын алуға арналған.

5 жұмыс режимі және әрқайсысында сұйықтық қысымының 6 деңгейі.

Су қысымының деңгейі: 207-828 кПа.

Пульсация жиілігі – минутына 1800.

Резервуардың сыйымдылығы: 230 мл.

Корпус материалы: ABS (соққыға төзімді пластик).

Ылғалдан қорғау: IPX7.

Қуат: 1500 mAh литий аккумуляторы.

Зарядтау: USB Type-C.

Қуат тұтыну – 5 Вт.

Толық зарядтау уақыты: 4-6 сағат.

Автономды жұмыс уақыты – 22 күнге дейін.

Өлшемдері: 220x62x75 мм.

Салмағы: 225 г.

Тауардың жарамдылық мерзімі жоқ.

Орташа қызмет ету мерзімі: 5 жыл.

Кепілдік: 2 жыл.

Бөлме температурасында сақтаңыз.

Ресей Федерациясындағы импорттаушы

МГАДЖЕТ ЖШҚ

Мекенжайы: 140002, Люберцы қ., Октябрьский дағ.,

20-үй, 2-корпус.

Қазақстандағы импорттаушы: МГАДЖЕТ КЗ ЖШС

Мекенжайы: Алматы қ., Төле би к-сі, 23а, 24-офис.

Қызмет ету мерзімі 5 жыл.

Тауар сертификатталған.

Өндірілген: Shenzhen BFT Electrical Appliances

Manufacturing Co., Ltd., 3F, Bldg 10, Changxing S&T park,

Wanan Rd, Shayi, Shajing Town, Baoan Dist., Shenzhen,

China.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОСУ

Саптаманы ирригатордың жоғарғы жағында орналасқан ұяшыққа орнатыңыз және оны тырс еткенше салыңыз. Резервуарды корпусан ажырату керек. Ол үшін резервуарды сағат тілімен (оңға) 45 градусқа бұраңыз. Осыдан кейін оны сумен толтырып, солға 45 градусқа бұру арқылы корпусқа қайта бекітіңіз. Құрылғыны қосу үшін қосу/сөндіру батырмасын 0,3 секунд басып тұрыңыз.

Назар аударыңыз! Резервуарды сумен толтыру кезінде ирригаторды қосу мүмкін емес.

ЖҰМЫС РЕЖИМІН ТАҢДАУ

Стандартты режим: сұйықтық ағынының стандартты қысымы, жоғары тиімді тазарту, күнделікті ауыз қуысының гигиенасына сәйкес келеді.

Нүктелік режим: 3 секунд ішінде ирригатор қысыммен сұйықтықтың пульсациялық ағынын береді, содан кейін кідіріс пен цикл қайталанады. Режим тіс аралықтарынан тамақ бөлшектерін жоюда тиімді.

Пульсация режимі: ирригатор жоғары және төмен қысымды ауыстырып, сұйықтық ағынын береді. Режим қызылиекті уқалау және күнделікті қолдану үшін ұсынылады.

Үзіліс: қосу/сөндіру батырмасын басу арқылы су беруді әлсіретуге немесе тоқтатуға болады. Режим суды үнемдейді және жеке аймақтарды тазартуға ыңғайлы.

Индикаторлардың ақ жарығы таңдалған режимді белгілейді (5 мән).

Маңызды: ирригаторда 2 минуттық таймер бар. 2 минут жұмыс істегеннен кейін құрылғы автоматты түрде өшеді. Оны қайта қосу үшін қосу/сөндіру батырмасын басыңыз.

СҰЙЫҚТЫҚ ҚЫСЫМЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІН ТАҢДАУ

Қажетті деңгейді таңдау үшін сұйықтық қысымын жоғарылату және төмендету батырмаларын пайдаланыңыз. Құрылғының корпусында жасыл индикаторлар (1-ден 6-ға дейін) неғұрлым көп болса, қысым деңгейі соғұрлым жоғары болады.

Назар аударыңыз! Құрылғыны қолданудың басында төмен қысымды құрылғыны пайдалану ұсынылады. Бұл ирригациялық тазартуға бейімделуге және қызылиектің қабынуы мен қан кету қаупін болдырмауға көмектеседі.

САПТАМАНЫ ОРНАТУ ЖӘНЕ АУЫСТЫРУ

Саптаманы тұтқаның жоғарғы жағында орналасқан ағытпаға орнатыңыз және оны тырс еткенше салыңыз. Саптаманы алып тастау үшін бұғаттау батырмасын басып тұрыңыз және саптаманы құрылғының корпусынан алыңыз.

Назар аударыңыз! Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде саптаманы шығару батырмасын баспаңыз.

СҰЙЫҚТЫҚҚА АРНАЛҒАН РЕЗЕРВУАРДЫ ОРНАТУ

Суретте көрсетілгендей, ирригатордың корпусын сол қолыңызбен ұстаңыз, ал оң қолыңызбен резервуарды сағат тілімен бұраңыз және тартып, корпусан ажыратыңыз. Резервуарды орнату үшін кері әрекеттерді орындаңыз.

ИРРИГАЦИЯ РЕЖИМІ

Саптаманы тістің бетіне 45 градус бұрышта орналастырыңыз. Ирригаторды қосыңыз, су ағынын тазалау аймағына бағыттаңыз. Су табиғи түрде ауыз қуысынан шұңғылшаға ағып кетуі керек. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін алдымен бүйір тістердің аймағын, содан кейін алдыңғы жағын өңдеңіз. Саптаманы тіс аралықтарында ұстап, қызылиек контуры бойымен жылжытыңыз.

Егер сізде соңғы 2 айда ауыз қуысына операция жасалса, ирригаторды қолданар алдында дәрігермен кеңесу керек. Оның кеңестері мен ұсыныстарын орындаңыз.

ИРРИГАЦИЯ АЯҚТАЛҒАННАН КЕЙІН

Қуатты өшіру батырмасын басыңыз. Резервуардағы қалған сұйықтықты

Егер сізде сұрақтар туындаса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

+7 700 219 40 93

www.revyline.kz

Кепілдік талоны

Ұйымның атауы

Сату күні

Мөрге арналған орын